

ITCH HEALER

Rozměry: 141 x 22 x 18,5 mm, Hmotnost: 40 g

Princip fungování

V průběhu bodnutí způsobí chemické látky, které hmyz do rány vypustí, zahájení obranné reakce organismu. Imunitní buňky jsou aktivovány, vyplavují histamin a posílají signál do nervového systému. Díky tomu dochází k podráždění místa vpichu a svědění. Termo pero uklidňuje lokální reakci za pomoci tepelné terapie, která je založena na dvou principech.

1. Teplo funguje jako protichůdný stimul pro nervové buňky, díky čemuž dochází ke snížení nežádoucí reakce a zmírnění svědění.
2. Teplo zpomalí vyplavení histaminu. Teplo ovlivňuje četné imunitní procesy, včetně uvolňování histaminu.

Funkce a vlastnosti

1. **Nepoužívá chemické látky.** Termo pero je elektrické zařízení poskytující úlevu od svědění způsobeného bodnutím hmyzu jako komár, vosa nebo včela.
2. **Rychlé a jednoduché použití.** Základní krok trvající jen několik desítek sekund ulevuje od svědění, bolesti a otoku od bodnutí hmyzu.
3. **Bezpečné použití u dětí.** Přesně řízená teplota, termo pero má 4 odlišné teploty odpovídající vašim potřebám.

Návod k použití

4 teplotní režimy:

Pozice 1 – 40°C

Pozice 2 – 43°C

Pozice 3 – 46°C

Pozice 4 – 51°C

Teplotní režim zvolíte přidržením vypínače teploty 2 sekundy (automaticky se vypne po 60 sekundách). Stisknutím hlavního vypínače spustíte termo pero (automaticky se vypne po 10 sekundách).

Rychlá úleva při bodnutí hmyzem bez použití chemických látek.



komár



včela



vosa



mravenec




veš



pavouk



štěnice

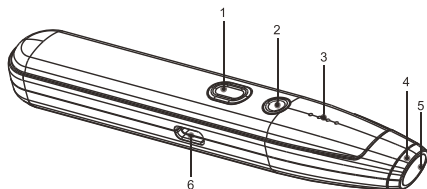

1. Vypínač teploty
2. Hlavní vypínač
3. Kontrolka teploty
4. Kontrolka chodu
5. Keramická hlava
6. USB-C

Nabíjení

Připojte USB-C kabel s AC adaptérem, PC atd. Vypínač teploty začne blikat. Po plném nabití baterie zůstane vypínač teploty rozsvícený.

Upozornění

1. Před prvním použitím zařízení baterii plně nabijte.
2. Zkontrolujte před použitím stav zařízení. Nepoužívejte jej, pokud na něm shledáte závady.
3. Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte.
4. Pokud si všimnete úniku kapaliny z baterie, zvláštních zápachů nebo deformací, okamžitě přestaňte výrobek používat a bezpečně ho zlikvidujte.
5. Nepoužívejte na čištění silné chemikálie nebo detergenty.
6. Nenechávejte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
7. Před skladováním dobijte baterii.
8. Při nabíjení baterie zařízení vypněte.
9. Tento produkt obsahuje baterii a podléhá specifickým přepravním předpisům. Zkontrolujte je před transportem přístroje.
10. Děti mohou zařízení používat jen za dohledu dospělého.

Pokud zařízení nefunguje

1. Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
2. Opakovaně zařízení zapněte a vypněte.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

Záruční podmínky

1. Záruční podmínky se řídí lokálními předpisy.
2. Pokud zjistíte skrytou vadu, kontaktujte svého prodejce.
3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození vzniklé v důsledku neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávného použití, nesprávné údržby, nehody, nedbalosti, úmyslného poškození, nebo poškození způsobeného používáním produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen.
4. Běžný pokles kapacity baterie způsobený jejím používáním se za vadu nepovažuje a nelze jej reklamovat v rámci záruky.

Výrobce:

Zhejiang Sorbo Technology co., Ltd.

No. 2, Daqing Road, Xinqiao Street,
Ouhai, Wenzhou, Zhejiang,
China 325016
sb@wzshengbo.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz



Vyrobeno v Číně

ITCH HEALER

Rozmery: 141 x 22 x 18,5 mm, Hmotnosť: 40 g

Princíp fungovania

V priebehu bodnutia spôsobia chemické látky, ktoré hmyz do rany vypustí, začatie obrannej reakcie organizmu. Imunitné bunky sú aktivované, vyplavujú histamín a posielajú signál do nervového systému. Vďaka tomu dochádza k podráždeniu miesta vpichu a svrbeniu. Termo pero upokojuje lokálnu reakciu za pomoci tepelnej terapie, ktorá je založená na dvoch princípoch.

1. Teplo funguje ako protichodný stimul pre nervové bunky, vďaka čomu dochádza k zníženiu nežiaducej reakcie a zmierneniu svrbenia.
2. Teplo spomalí vyplavenie histamínu. Štúdie ukazujú, že teplo ovplyvňuje početné imunitné procesy, vrátane uvoľňovania histamínu.

Funkcie a vlastnosti

1. **Nepoužíva chemické látky.** Termo pero je elektrické zariadenie poskytujúce úľavu od svrbenia spôsobeného bodnutím hmyzom ako komár, osa alebo včela.
2. **Rýchle a jednoduché použitie.** Zároveň trvajúci len niekoľko desiatok sekúnd úľavu od svrbenia, bolesti a opuchu od bodnutia hmyzom.
3. **Bezpečné použitie u detí.** Presne riadená teplota, termo pero má 4 odlišné teploty zodpovedajúce vašim potrebám.

Návod na použitie

4 teplotné režimy:

Pozícia 1 – 40°C


Pozícia 2 – 43°C

Pozícia 3 – 46°C

Pozícia 4 – 51°C

Teplotný režim zvolíte pridržením vypínača teploty 2 sekundy (automaticky sa vypne po 60 sekundách). Stlačením hlavného vypínača spustíte termo pero (automaticky sa vypne po 30 sekundách).

Rýchla úľava pri bodnutí hmyzom bez použitia chemických látok.

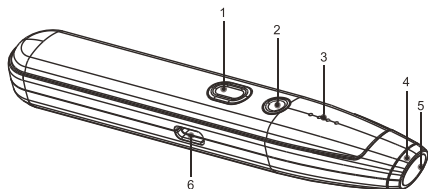

1. Vypínač teploty
2. Hlavný vypínač
3. Kontrolka teploty
4. Kontrolka chodu
5. Keramická hlava
6. USB-C

Nabíjanie

Pripojte USB-C kábel s AC adaptérom, PC atď. Vypínač teploty začne blikať. Po plnom nabití batérie zostane vypínač teploty rozsvietený.

Upozornenie

1. Pred prvým použitím zariadenia batériu úplne nabite.
2. Skontrolujte pred použitím stav zariadenia. Nepoužívajte ho, pokiaľ na ňom vidíte závadu.
3. Ak zariadenie vydáva neobvyklý zvuk alebo sa prehrieva, okamžite ho vypnite.
4. Ak si všimnete únik kvapaliny z batérie, zvláštnych zápachov alebo deformácií, okamžite prestaňte výrobok používať a bezpečne ho zlikvidujte.
5. Nepoužívajte na čistenie silné chemikálie alebo detergenty.
6. Nenechávajte zariadenie vo veľmi chladnom, horúcom alebo vlhkom prostredí.
7. Pred skladovaním dobite batériu.
8. Pri nabíjaní batérie zariadenie vypnite.
9. Tento produkt obsahuje batériu a podlieha špecifickým prepravným predpisom. Skontrolujte ich pred transportom prístroja.
10. Deti môžu zariadenie používať len za dohľadu dospelého.

Ak zariadenie nefunguje

1. Skontrolujte, či na povrchu nie je voda alebo iná kvapalina.
2. Opakovane zariadenie zapnite a vypnite.
3. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

Záručné podmienky

1. Záručné podmienky sa riadia lokálnymi predpismi.
2. Ak zistíte skrytú vadu, kontaktujte svojho predajcu.
3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, poškodenie vzniknuté v dôsledku neoprávnenej úpravy alebo zmeny, nesprávneho použitia, nesprávnej údržby, nehody, nedbanlivosti, úmyselného poškodenia, alebo poškodenia spôsobeného používaním produktu na iný účel, než na ktorý je určený.
4. Riešenie pokles kapacity batérie spôsobenej jej používaním sa za vadu nepovažuje a nemožno ho reklamovať v rámci záruky.

Výrobca:

Zhejiang Sorbo Technology co., Ltd.
No. 2, Daqing Road, Xinqiao Street,
Ouhai, Wenzhou, Zhejiang,
China 325016
sb@wzshengbo.com

Dovozca:

Subjekt zodpovedný za výrobok v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz