

ITCH HEALER

Rozměry: 141 x 22 x 18,5 mm, Hmotnost: 40 g

Princip fungování

V průběhu bodnutí způsobí chemické látky, které hmyz do rány vypustí, zahájení obranné reakce organismu. Imunitní buňky jsou aktivovány, vyplavují histamin a posílají signál do nervového systému. Díky tomu dochází k podráždění místa vpichu a svědění. Termo pero uklidňuje lokální reakci za pomoci tepelné terapie, která je založena na dvou principech.

1. Teplo funguje jako protichůdný stimul pro nervové buňky, díky čemuž dochází ke snížení nežádoucí reakce a zmírnění svědění.
2. Teplo zpomalí vyplavení histaminu. Teplo ovlivňuje četné imunitní procesy, včetně uvolňování histaminu.

Funkce a vlastnosti

1. **Nepoužívá chemické látky.** Termo pero je elektrické zařízení poskytující úlevu od svědění způsobeného bodnutím hmyzu jako komár, vosu nebo včela.
2. **Rychlé a jednoduché použití.** Zárok trvající jen několik desítek sekund ulevuje od svědění, bolesti a otoku od bodnutí hmyzu.
3. **Bezpečné použití u dětí.** Přesně řízená teplota, termo pero má 4 odlišné teploty odpovídající vašim potřebám.

Návod k použití

4 teplotní režimy:

Pozice 1 – 40°C

Pozice 2 – 43°C

Pozice 3 – 46°C

Pozice 4 – 51°C

Teplotní režim zvolíte přidržením vypínače teploty 2 sekundy (automaticky se vypne po 60 sekundách). Stisknutím hlavního vypínače spustíte termo pero (automaticky se vypne po 10 sekundách).

Rychlá úleva při bodnutí hmyzem bez použití chemických látek.



komár



včela



vosa



mravenec




veš



pavouk



štěnice

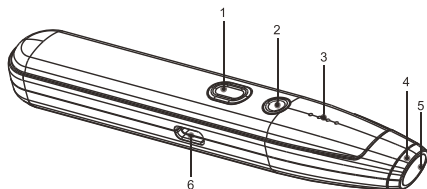

1. Vypínač teploty
2. Hlavní vypínač
3. Kontrolka teploty
4. Kontrolka chodu
5. Keramická hlava
6. USB-C

Nabíjení

Připojte USB-C kabel s AC adaptérem, PC atd. Vypínač teploty začne blikat. Po plném nabití baterie zůstane vypínač teploty rozsvícený.

Upozornění

1. Před prvním použitím zařízení baterii plně nabijte.
2. Zkontrolujte před použitím stav zařízení. Nepoužívejte jej, pokud na něm shledáte závady.
3. Pokud zařízení vydává neobvyklý zvuk nebo se přehřívá, okamžitě jej vypněte.
4. Pokud si všimnete úniku kapaliny z baterie, zvláštních zápachů nebo deformací, okamžitě přestaňte výrobek používat a bezpečně ho zlikvidujte.
5. Nepoužívejte na čištění silné chemikálie nebo detergenty.
6. Nenechávejte zařízení ve velmi chladném, horkém nebo vlhkém prostředí.
7. Před skladováním dobijte baterii.
8. Při nabíjení baterie zařízení vypněte.
9. Tento produkt obsahuje baterii a podléhá specifickým přepravním předpisům. Zkontrolujte je před transportem přístroje.
10. Děti mohou zařízení používat jen za dohledu dospělého.

Pokud zařízení nefunguje

1. Zkontrolujte, zda na povrchu není voda nebo jiná kapalina.
2. Opakovaně zařízení zapněte a vypněte.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.

Záruční podmínky

1. Záruční podmínky se řídí lokálními předpisy.
2. Pokud zjistíte skrytou vadu, kontaktujte svého prodejce.
3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, poškození vzniklé v důsledku neoprávněné úpravy nebo změny, nesprávného použití, nesprávné údržby, nehody, nedbalosti, úmyslného poškození, nebo poškození způsobeného používáním produktu k jinému účelu, než ke kterému je určen.
4. Běžný pokles kapacity baterie způsobený jejím používáním se za vadu nepovažuje a nelze jej reklamovat v rámci záruky.

Výrobce:

Zhejiang Sorbo Technology co., Ltd.

No. 2, Daqing Road, Xinqiao Street,
Ouhai, Wenzhou, Zhejiang,
China 325016
sb@wzshengbo.com

Dovozce:

Subjekt odpovědný za výrobek v EU
Ing. Jiří Najman
Masarykova 885
252 63 Roztoky
Česká republika
shop@kajakarshop.cz



Vyrobeno v Číně